

Ελληνικά

iCare PATIENT2



iCare PATIENT2
Εγχειρίδιο οδηγιών για iOS

icare

Πνευματικά δικαιώματα

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με ένα μεταφρασμένο έγγραφο, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με:

Την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ισχύει για το λογισμικό iCare PATIENT2 έκδοσης 1.0.x, όπου το x είναι μια μικρή αναθεώρηση χωρίς αντίκτυπο σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Copyright © 2021 Icare Finland Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το iCare αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Icare Finland Oy, όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Κατασκευασμένο στη Φινλανδία.

Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Google Inc. Το Google Play αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Το App Store είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η ένδειξη και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Icare Finland Oy γίνεται βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland (Φινλανδία)

Τηλ. +358 0 9775 1150

www.icare-world.com, info@icare-world.com



Περιεχόμενα

1. Ενδεδειγμένη χρήση	4
2. Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια	4
3. Εισαγωγή.....	5
4. Απαιτήσεις συστήματος για το iCare PATIENT2	6
5. Απόκτηση διαπιστευτηρίων iCare.....	6
6. Εγκατάσταση της εφαρμογής.....	7
7. Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας στο τονόμετρο χρησιμοποιώντας Bluetooth® ...	7
7.1. Ενεργοποίηση του Bluetooth στο τονόμετρο.....	7
7.2. Ζευγοποίηση του τονομέτρου με τη φορητή συσκευή σας	7
8. Μεταφορά δεδομένων μετρήσεων.....	8
9. Προβολή των αποτελεσμάτων μετρήσεών σας.....	8
10. Αλλαγή των ρυθμίσεων iCare PATIENT2.....	10
11. Αποσύνδεση από το iCare PATIENT2.....	10
12. Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	10
13. Τεχνική περιγραφή.....	12
14. Σύμβολα.....	13

1. Ενδειγμένη χρήση

Το iCare PATIENT2 (TS05) είναι μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που προορίζεται για τη μεταφορά δεδομένων οφθαλμικών μετρήσεων στην iCare CLINIC ή σε εξωτερικό σύστημα. Επίσης, έχει την ικανότητα να εμφανίζει δεδομένα οφθαλμικών μετρήσεων και να βοηθάει στη διαχείριση του γλαυκώματος. Ενδείκνυται για χρήση από επαγγελματίες περίθαλψης υγείας αλλά και από μη ειδήμονες χρήστες.


2. Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή με εγκατεστημένη την εφαρμογή iCare PATIENT2 έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα και ημερομηνία.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν από τη λήψη μετρήσεων, ενημερώστε το ρολόι του τονομέτρου στην τοπική σας ώρα χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις του τονομέτρου ή αυτόματα συνδέοντας το τονόμετρο στην εφαρμογή iCare PATIENT2.
- ⚠ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!** Αναφέρετε τυχόν σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με το τονόμετρο στην αρμόδια υγειονομική αρχή και στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

3. Εισαγωγή

Το σύστημα λογισμικού iCare αποτελείται από τα ακόλουθα:

- Τονόμετρο iCare HOME2 για τη μέτρηση της πίεσης των ματιών
- Εφαρμογή για φορητές συσκευές iCare PATIENT2 με την οποία οι ασθενείς και οι επαγγελματίες περίθαλψης υγείας μπορούν να προβάλουν δεδομένα μετρήσεων και να τα μεταφέρουν και να τα αποθηκεύσουν στο iCare CLINIC ή στην υπηρεσία iCare CLOUD
- iCare CLINIC, μια υπηρεσία λογισμικού που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης με την οποία οι επαγγελματίες περίθαλψης υγείας και οι ασθενείς μπορούν να προβάλουν τα δεδομένα μετρήσεων

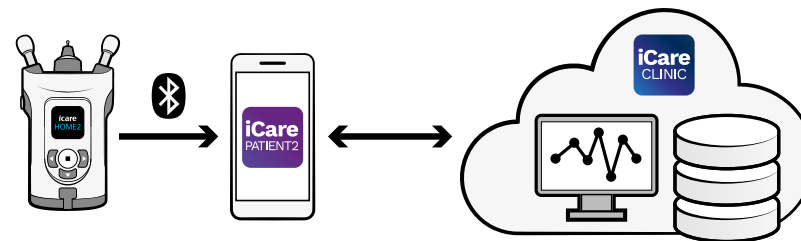

Το iCare CLOUD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της πίεσης των ματιών που μεταφέρονται από το iCare HOME2 χρησιμοποιώντας το iCare PATIENT2. Οι ασθενείς μπορούν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα μετρήσεων σε ιδιωτικό λογαριασμό στην υπηρεσία iCare CLOUD, εάν το τονόμετρο τους δεν είναι καταχωρημένο σε λογαριασμό iCare CLINIC ενός επαγγελματία περίθαλψης υγείας.

Για να προβάλετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων με την εφαρμογή PATIENT2, πρέπει να συνδεθείτε με διαπιστευτήρια iCare. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης διαπιστευτηρίων iCare, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «5. Απόκτηση διαπιστευτηρίων iCare».

Τα διαπιστευτήρια προστατεύουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας από άλλους. Εάν η εφαρμογή σας ειδοποιεί για μη έγκυρα διαπιστευτήρια, έχετε εισαγάγει λανθασμένο κωδικό πρόσβασης ή διεύθυνση email, ή ο κωδικός πρόσβασής σας μπορεί να έχει κλαπεί. Μην δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν άλλο.

Εάν είστε επαγγελματίας περίθαλψης υγείας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το iCare PATIENT2 μόνο για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της πίεσης των ματιών στο iCare CLINIC χωρίς να χρησιμοποιήσετε το iCare PATIENT2 για την προβολή αποτελεσμάτων, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής HOME2, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών iCare HOME2.

4. Απαιτήσεις συστήματος για το iCare PATIENT2

- iPhone
- Λειτουργικό σύστημα iOS 12 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Σύνδεση στο Internet

Για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή iCare PATIENT2 λειτουργεί σωστά, να εγκαθιστάτε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για τη φορητή συσκευή σας και την εφαρμογή iCare PATIENT2.

5. Απόκτηση διαπιστευτηρίων iCare

Για να προβάλετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων με την εφαρμογή iCare PATIENT2, πρέπει να συνδεθείτε με διαπιστευτήρια iCare. Εάν το τονόμετρο HOME2 είναι εγγεγραμμένο στον λογαριασμό CLINIC μιας κλινικής ή νοσοκομείου, επικοινωνήστε με την κλινική ή το νοσοκομείο για να λάβετε τα διαπιστευτήρια.

Σημείωση για επαγγελματίες περίθαλψης υγείας: Τα διαπιστευτήρια του ασθενούς μπορούν να δημιουργηθούν στο iCare CLINIC στην καρτέλα Patient profile (Προφίλ ασθενούς) στην ενότητα User account (Λογαριασμός χρήστη) παρέχοντας τη διεύθυνση email του ασθενούς. Ο ασθενής θα λάβει μια πρόσκληση μέσω email, στην οποία θα υπάρχει ένας σύνδεσμος για τη δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης.

Εάν το τονόμετρο δεν είναι εγγεγραμμένο σε λογαριασμό CLINIC οποιασδήποτε κλινικής ή νοσοκομείου, πρέπει να εγγράψετε το τονόμετρό σας στο iCare CLOUD προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή iCare PATIENT2. Ελέγξτε τον οδηγό «Εναρξη» που συνοδεύει το τονόμετρο iCare HOME2, για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής του τονομέτρου σας. Θα λάβετε τα διαπιστευτήρια iCare σας κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία περίθαλψης υγείας, τον διανομέα τονομέτρων ή την iCare.

Σημείωση! Τα διαπιστευτήρια επαγγελματία χρήστη iCare CLINIC (ιατρού, εκπαιδευτή ή διαχειριστή) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση στην εφαρμογή PATIENT2. Η εφαρμογή PATIENT2 χρησιμοποιείται μόνο για την εξέταση των αποτελεσμάτων ενός μεμονωμένου ασθενούς χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια CLINIC ενός μεμονωμένου ασθενούς και για τη μεταφόρτωση δεδομένων μετρήσεων από iCare HOME2 στο iCare CLINIC, στην οποία περίπτωση δεν απαιτείται σύνδεση στο PATIENT2.

6. Εγκατάσταση της εφαρμογής








1. Ανοίξτε το App Store στη φορητή συσκευή σας.
2. Αναζητήστε το iCare PATIENT2.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.

7. Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας στο τονόμετρο χρησιμοποιώντας Bluetooth®

7.1. Ενεργοποίηση του Bluetooth στο τονόμετρο

Σημείωση: Η εφαρμογή iCare PATIENT2 είναι συμβατή μόνο με το τονόμετρο iCare HOME2.


Το Bluetooth μπορεί να είναι ήδη ανοικτό στο τονόμετρό σας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση Bluetooth του τονομέτρου και να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, εάν χρειαστεί, εάν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

1. Πατήστε  μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για να ενεργοποιήσετε το τονόμετρο.
2. Πατήστε  μέχρι να δείτε **SETTINGS** (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) στην οθόνη του τονομέτρου και πατήστε .
3. Πατήστε  μέχρι να δείτε **BLUETOOTH** και πατήστε .
4. Εάν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, πατήστε  μέχρι να δείτε **TURN ON** (ΕΝΕΡΓ.) και πατήστε .

7.2. Ζευγοποίηση του τονομέτρου με τη φορητή συσκευή σας

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή iCare PATIENT2 και αγγίξτε **START USING THE APP** (ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ).
3. Επιλέξτε την περιοχή διαμονής σας και τη σωστή επιλογή για το σημείο όπου θα αποθηκεύονται τα δεδομένα πίεσης των ματιών σας.
4. Διαβάστε τους όρους παροχής υπηρεσιών και συμφωνήστε με τους όρους χρήσης και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια.
5. Αγγίξτε **CONTINUE** (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).
6. Πατήστε **SCAN DEVICES** (ΣΑΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ). Εάν η εφαρμογή ζητήσει άδεια χρήσης του Bluetooth, αγγίξτε **OK**.
7. Επιλέξτε το σωστό τονόμετρο από τη λίστα των τονομέτρων iCare HOME2 που βρέθηκαν. Βεβαιωθείτε ότι ο σειριακός αριθμός του τονομέτρου στην οθόνη της φορητής συσκευής

αντιστοιχεί με αυτόν στο πίσω μέρος του τονομέτρου. Ο σειριακός αριθμός στο τονόμετρό σας είναι επισημασμένος με την ένδειξη SN.

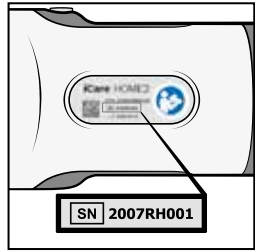

8. Πατήστε **PAIR TONOMETER** (ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ).
9. Στο αίτημα ζευγοποίησης Bluetooth, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη του τονομέτρου και αγγίξτε **Pair** (Ζευγοποίηση).
10. Όταν το τονόμετρο έχει ζευγοποιηθεί με επιτυχία με τη φορητή συσκευή σας, αγγίξτε **CONTINUE** (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) στην οθόνη PATIENT2.

Τώρα μπορείτε να αγγίξετε **SYNC** (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ) για να μεταφέρετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων από το τονόμετρο στη φορητή συσκευή σας ή να συνδεθείτε στην εφαρμογή iCare PATIENT2 για να δείτε τα προηγούμενα αποτελέσματα των μετρήσεών σας.

8. Μεταφορά δεδομένων μετρήσεων

1. Ενεργοποιήστε το τονόμετρο.
2. Στη φορητή συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή iCare PATIENT2.
3. Αγγίξτε **SYNC** (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ) για να μεταφέρετε τις μετρήσεις σας από το τονόμετρο στη φορητή συσκευή σας.

Η μεταφορά των αποτελεσμάτων μετρήσεων μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου. Θα δείτε το μήνυμα «[αριθμός] measurements transferred» ([αριθμός] μετρήσεων που μεταφέρθηκαν) ή το μήνυμα «no new measurements» (δεν υπάρχουν νέες μετρήσεις) μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων.


Τα αποτελέσματα μετρήσεων παραμένουν στο τονόμετρο iCare HOME2 μετά τη μεταφορά των δεδομένων μετρήσεων.

9. Προβολή των αποτελεσμάτων μετρήσεών σας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή iCare PATIENT2 στη φορητή συσκευή σας.

2. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ακόμα, αγγίξτε **LOGIN** (ΣΥΝΔΕΣΗ) και εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά iCare σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης διαπιστευτηρίων iCare, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «5. Απόκτηση διαπιστευτηρίων iCare».
3. Αγγίξτε **MEASUREMENTS** (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ).

Το μπλε γράφημα δείχνει τις μετρήσεις του δεξιού ματιού και το πορτοκαλί γράφημα τις μετρήσεις του αριστερού ματιού.

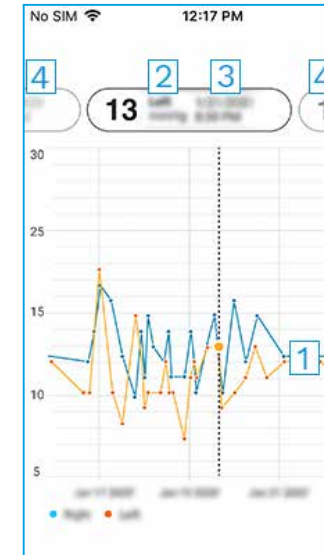



- 1: Επιλεγμένη μέτρηση στο γράφημα
- 2: Το αποτέλεσμα της επιλεγμένης μέτρησης σε mmHg
- 3: Ημερομηνία και ώρα της μέτρησης
- 4: Αγγίξτε για να ανοίξετε την προηγούμενη ή την επόμενη μέτρηση

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο γράφημα, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

Για μεγέθυνση και σμίκρυνση στο γράφημα, πραγματοποιήστε σύγκλιση ή απόκλιση δύο δαχτύλων στην οθόνη αφής οριζόντια.

Για να δείτε το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης, αγγίξτε τις κουκκίδες στο γράφημα ή χρησιμοποιήστε το μενού χαπακιού στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε τη μέτρηση που θέλετε.

Εάν μια μέτρηση έχει επισημανθεί με , η μέτρηση βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης κλίμακας. Αγγίξτε  για να δείτε το αποτέλεσμα μετρήσεων.

10. Αλλαγή των ρυθμίσεων iCare PATIENT2

Στην προβολή Αφιετηρίας, αγγίξτε ≡ > **Settings** (Ρυθμίσεις).

Για να ορίσετε τις τιμές που θα εμφανίζονται στο γράφημα, αγγίξτε **Max value in graph** (Μέγιστη τιμή στο γράφημα) ή **Min value in graph** (Ελάχιστη τιμή στο γράφημα) και επιλέξτε τη νέα τιμή.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο τονόμετρο με την εφαρμογή, αγγίξτε **Change tonometer** (Αλλαγή τονομέτρου). Αποσυνδέστε αυτόματα από την εφαρμογή. Για να μεταφέρετε δεδομένα μετρήσεων από άλλο τονόμετρο, πρέπει να τα ζευγοποιήσετε με τη φορητή συσκευή σας.

11. Αποσύνδεση από το iCare PATIENT2

Όταν κάνετε καθημερινή χρήση, δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε από την εφαρμογή. Ωστόσο, εάν δώσετε το τηλέφωνό σας σε κάποιον άλλον, αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή για να μην προβάλλουν τα αποτελέσματα μετρήσεών σας.

Στην προβολή Αφιετηρίας, αγγίξτε ≡ > **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Logout** (Αποσύνδεση).

Όταν έχετε αποσυνδεθεί, μπορείτε ακόμα να μεταφέρετε μετρήσεις από το τονόμετρο **στο iCare CLINIC ή στο iCare CLOUD**, αλλά δεν μπορείτε να τις δείτε στη φορητή συσκευή σας.

Εάν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή iCare PATIENT2, μπορείτε να την απεγκαταστήσετε. Η απεγκατάσταση της εφαρμογής δεν θα διαγράψει τα δεδομένα μετρήσεων της πίεσης των ματιών σας από το iCare CLINIC ή το iCare CLOUD.

12. Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Συμβουλή: Για πληροφορίες επικοινωνίας, όπως τις διευθύνσεις email της iCare, αγγίξτε ≡ > **Info** (Πληροφορίες).

- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «Cannot scan for devices» (Δεν είναι δυνατή η σάρωση για συσκευές)**, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη φορητή συσκευή σας. Χορηγήστε στο iCare PATIENT2 την άδεια να χρησιμοποιεί Bluetooth στη φορητή συσκευή σας: μεταβείτε στο **Settings** (Ρυθμίσεις) στη φορητή συσκευή σας > **iCare PATIENT2** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα «Error during pairing» (Σφάλμα κατά τη ζευγοποίηση)**, ζευγοποιήστε ξανά το τονόμετρό σας με τη φορητή συσκευή σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό PIN στο αίτημα ζευγοποίησης Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το τονόμετρο είναι

ενεργοποιημένο και ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη τόσο στο τονόμετρο όσο και στη φορητή συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι η χρήση Bluetooth επιτρέπεται στη φορητή συσκευή σας.

- **Εάν έχετε μεταφέρει τις μετρήσεις σας από το τονόμετρο, αλλά δεν μπορείτε να τις δείτε στα αποτελέσματα μετρήσεών σας**, βεβαιωθείτε ότι το τονόμετρο είναι εγγεγραμμένο στο όνομά σας. Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία περιθάλψης υγείας, τον διανομέα τονομέτρων ή την iCare. Ελέγξτε επίσης ότι το ρολόι τονομέτρου δείχνει τη σωστή ώρα. Εάν δεν είναι, μεταφέρετε τα δεδομένα μετρήσεων μία φορά από το τονόμετρο στη φορητή συσκευή σας. Το ρολόι του τονομέτρου ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα «Error during transfer» (Σφάλμα κατά τη μεταφορά)**, βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το τονόμετρο είναι ενεργοποιημένο και ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη τόσο στο τονόμετρο όσο και στη φορητή συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χορηγήσει στο iCare PATIENT2 την άδεια να χρησιμοποιεί Bluetooth στη φορητή συσκευή σας: μεταβείτε στο **Settings** (Ρυθμίσεις) στη φορητή συσκευή σας > **iCare PATIENT2** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «Connection error to server. Can't load measurements» (Σφάλμα σύνδεσης με τον διακομιστή. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση μετρήσεων)**, βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Κλείστε την προβολή μετρήσεων και μετά ανοίξτε την ξανά. Θα λάβετε επίσης αυτό το μήνυμα σφάλματος εάν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή iCare PATIENT2 με διαπιστευτήρια επαγγελματία περιθάλψης υγείας CLINIC αντί για διαπιστευτήρια ασθενούς.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «User is not authorized. Can't load measurements» (Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση μετρήσεων)**, η συνεδρία σύνδεσής σας έχει λήξει. Συνδεθείτε ξανά.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «Device not registered» (Η συσκευή δεν είναι εγγεγραμμένη)**, το τονόμετρό σας πρέπει να εγγραφεί. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο «5. Απόκτηση διαπιστευτηρίων iCare» για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής του τονομέτρου.
- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «Login failed due to unexpected error» (Η σύνδεση απέτυχε λόγω αναπάντεχου σφάλματος)**, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή iCare PATIENT2. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία περίθαλψης υγείας, τον διανομέα τονομέτρων ή την iCare.

- **Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος «Invalid credentials» (Μη έγκυρα διαπιστευτήρια),** δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή iCare PATIENT2. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email και ο κωδικός πρόσβασής σας είναι σωστά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία περίθαλψης υγείας, τον διανομέα τονομέτρων ή την iCare.
- **Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την εφαρμογή iCare PATIENT2,** επικοινωνήστε με τον επαγγελματία περίθαλψης υγείας, τον διανομέα τονομέτρων ή την iCare.
- **Εάν η εφαρμογή iCare PATIENT2 δεν λειτουργεί σωστά ή βρείτε λάθη στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών,** επικοινωνήστε με τη διεύθυνση **info@icare-world.com** ή, εάν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη διεύθυνση **infoUSA@icare-world.com**.

13. Τεχνική περιγραφή

Όταν το τονόμετρο iCare HOME2 είναι συνδεδεμένο σε μια φορητή συσκευή με σύνδεση Bluetooth, η εφαρμογή iCare PATIENT2 διαβάζει τα αποτελέσματα μετρήσεων της πίεσης των ματιών από το τονόμετρο και τα μεταφέρει και τα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων iCare CLINIC στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων της φορητής συσκευής. Η εφαρμογή επίσης χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων για να διαβάσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τη βάση δεδομένων, επειδή τα αποτελέσματα αποθηκεύονται μόνο στη βάση δεδομένων και όχι στη φορητή συσκευή.





Μην συνδέετε τη φορητή συσκευή με την εφαρμογή iCare PATIENT2 που είναι εγκατεστημένη στο δίκτυο πληροφορικής ενός επαγγελματία περίθαλψης υγείας στο οποίο είναι συνδεδεμένες οι ιατρικές συσκευές ή το λογισμικό του επαγγελματία περίθαλψης υγείας.

Η φορητή συσκευή με εγκατεστημένη την εφαρμογή iCare PATIENT2 μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε σύνδεση στο διαδίκτυο που επιτρέπει την επικοινωνία HTTPS.

Εάν η σύνδεση δεδομένων αποτύχει, τα αποτελέσματα μετρήσεων δεν μπορούν να μεταφερθούν από το τονόμετρο iCare HOME2 στη βάση δεδομένων iCare CLINIC και τα αποτελέσματα μετρήσεων δεν μπορούν να προβληθούν.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της πίεσης των ματιών εμφανίζονται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg) με ακρίβεια ενός χιλιοστού στήλης υδραργύρου. Η διαθέσιμη κλίμακα του άξονα γ είναι από 5 mmHg έως 50 mmHg.

14. Σύμβολα

	Κατασκευαστής
	Προσοχή
Rx Μόνο (ΗΠΑ)	Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού ή κατάλληλα αδειοδοτημένου επαγγελματία.
	Σήμανση CE
	Το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν

**Icare Finland Oy**

Äyritie 22
01510 Vantaa, Φινλανδία
Τηλ. +358 0 9775 1150
info@icare-world.com

Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245
Raleigh, NC. 27609
Τηλ. +1 888.422.7313
Φαξ +1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com

www.icare-world.com

icare

Το iCare είναι σήμα κατατεθέν της Icare Finland oy. Οι Centervue S.p.A, Icare Φινλανδία Oy, και Icare USA Inc. ανήκουν στον Όμιλο Revenio και αντιπροσωπεύουν το εμπορικό σήμα iCare. Δεν εγκρίνονται ούτε προσφέρονται όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι προσφορές που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο σε κάθε αγορά και η συγκεκριμένη επισήμανση και οδηγίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές στον σχεδιασμό και το πεδίο εφαρμογής της παράδοσης και ως αποτέλεσμα των τρεχουσών τεχνικών εξελίξεων.